

sanitas

Diagnose- waage



SBF 72

SBF 72 Bluetooth® Diagnosewaage

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage

Mit **Bluetooth®** low energy technology -
Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer
im Blick

Monitoring der Messergebnisse über
„HealthCoach“ App / Web / PC

Datenübermittlung im eingeschalteten Zustand der Waage zur
App

2 Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil,
Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil
- 100 g für Körpergewicht

5 Aktivitätsgrade

8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung

Ziffernhöhe: 30 mm

Trittlfläche aus Sicherheitsglas

Umstellung von kg, lb, st

Tragkraft: 180 kg

Überlastungsanzeige

Ein- und Abschaltautomatik

Inklusive 1 x 3V CR 2032 Batterie

Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,1 cm

Produktgewicht: ca. 1470 g

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74730 5

Art.Nr.: 747.30

SBF 72 Bluetooth® Diagnostic bathroom scale

Innovative networking between smartphone and scale

With **Bluetooth®** low energy technology -
keep track of your measurements and body data at
home and on the move

Measurements can be monitored using
“HealthCoach” app / Internet / PC

Data transfer when scale is on to app

2 electrodes made of brushed stainless steel

Display of body weight, body fat, body water,
muscle ratio, bone mass, AMR/BMR and BMI

Graduation:

- 0.1% for body fat, body water and muscle ratio
- 100 g for body weight

5 activity levels

8 user memories with automatic user recognition

Digit size: 30 mm

Weighing area made from safety glass

Change over to kg, lb, st

Capacity: 180 kg

Overload indication

Automatic switch-on and - off

1 x 3V CR 2032 battery included

Product measurements (LxWxH): 30 x 30 x 2.1 cm

Product weight: approx. 1470 g

3 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping unit: -


EAN no.: 4211125 74730 5

Item no.: 747.30



SBF 72

<p>1 Check list</p> <p>☐ Liste der unterstützten Geräte ☐ List of supported devices</p>	<p>3 Step on</p> <p>☐ Ermittlung von Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI, BMR/AMR (kcal) ☐ Calculates body fat, body water, muscle percentage, bone mass, BMI, BMR/AMR (kcal)</p>
<p>2 Download App</p> <p>☐ Komfortable Auswertung über „HealthCoach“ App ☐ Convenient evaluation using „HealthCoach“ app</p>	<p>4 Get connected</p> <p>☐ Übertragung durch Bluetooth® low energy technology ☐ Transfer via Bluetooth® low energy technology</p>

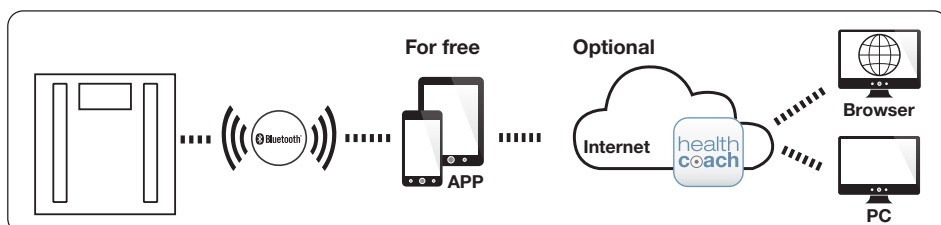

Scale can only be used with its full functionality with the "HealthCoach" app, smartphone not included in delivery

Kinderleichte Inbetriebnahme / Easy set-up

A) Mit Benutzereinstellung über App / With user-setting via app

<p>1</p> <p>☐ Batterie einlegen (1 x 3V CR 2032) ☐ Insert battery (1 x 3V CR 2032)</p>	<p>2</p> <p>☐ „HealthCoach“ aus dem App Store installieren ☐ Install "HealthCoach" from the App Store</p>
---	--

<p>3</p> <p>☐ SBF 72 in App auswählen ☐ Select SBF 72 in the app</p>	<p>4</p> <p>☐ Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen ☐ Assign the user when requested to do so by the app</p>
---	---

B) Ohne Benutzereinstellung über App / Without user-setting via app

	<p>☐ Direktstart: Bei Start der Waage ohne App misst die Waage das korrekte Gewicht. Die Körperanalysewerte werden mit Standardparametern berechnet und sind daher zwangsläufig mehr oder weniger ungenau. Diese Werte werden nicht auf der Waage gespeichert.</p> <p>☐ Direct Start: When using the scale without app the weight is measured correctly. The values of body analyses are calculated with standard parameters and therefore less accurate. These values will not be saved on the scale.</p>
--	--

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hans Dinslage GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.