

SANITAS

Diagnose-
waage



SBF 70

SBF 70 Diagnosewaage

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage

Mit **Bluetooth®** Technologie (4.0) -
Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs
immer im Blick

Inklusive „HealthCoach“ App zum Download

Automatische Datenübermittlung innerhalb der
Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App

Mit Anzeige von 3 Initialen des Benutzers

2 Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil,
Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil
- 100 g für Körpergewicht

5 Aktivitätsgrade

8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung

Ziffernhöhe: 22 mm

Trittpläche aus Sicherheitsglas

Umstellung von kg, lb, st

Tragkraft: 180 kg

Überlastungsanzeige

Abschaltautomatik

Inklusive 3 x 1,5V AAA Batterien

Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,3 cm

Produktgewicht: ca. 1650 g

3 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74838 8

Art.Nr.: 748.38

SBF 70 Diagnostic scale

Innovative networking between smartphone and scale

With **Bluetooth®** technology - keep track of your
measurements and body data at home and on the
move

inclusive "HealthCoach" App for downloading

Automatically data transfer within the **Bluetooth®**
range if the app is open

Displays 3 initials of the user

2 electrodes made of brushed stainless steel

Display of body weight, body fat, body water,
muscle ratio, bone mass, AMR/BMR and BMI

Graduation:

- 0.1% for body fat, body water and muscle ratio
- 100 g for body weight

5 activity levels

8 user memories with automatic user recognition

Digit size: 22 mm

Weighing area made from safety glass

Change over to kg, lb, st

Capacity: 180 kg

Overload indication

Automatic switch-off

3 x 1.5V AAA batteries included

Product measurements (LxWxH): 30 x 30 x 2.3 cm

Product weight: approx. 1650 g

3 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping unit: -

EAN no.: 4211125 74838 8

Item no.: 748.38

SANITAS

SANITAS

Diagnose-
waage



4 Schritte zu Ihrer Verbindung / 4 steps to get connected:

1

Check list



- ▢ Liste der unterstützten Geräte
- ▣ List of supported devices

2

Download App



- ▢ Zusätzlich: komfortable Auswertung über Sanitas HealthCoach Software
- ▣ Additional: convenient evaluation using Sanitas HealthCoach software



3

Step on



- ▢ Ermittlung von Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, BMI, BMR/AMR (kcal)
- ▣ Calculates body fat, body water, muscle percentage, bone mass, BMI, BMR/AMR (kcal)

4


Get connected



- ▢ Automatische Übertragung durch Bluetooth® Technologie
- ▣ Automatic transfer via Bluetooth® technology


Scale can only be used with its full functionality with the "Sanitas HealthCoach" app, smartphone not included in delivery

SBF 70

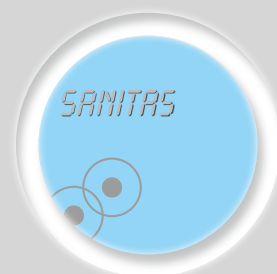

SBF 70

Kinderleichte Inbetriebnahme

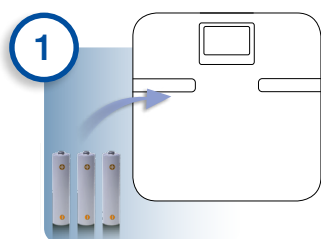


- ▢ Batterien einlegen (3xAAA, 1,5V)
- ▣ Insert batteries (3 x AAA, 1.5V)




- ▢ Bluetooth in den Einstellungen des Smartphones aktivieren
- ▣ Activate Bluetooth in the smartphone settings



- ▢ „HealthCoach“ aus dem App Store installieren
- ▣ Install "HealthCoach" from the App Store

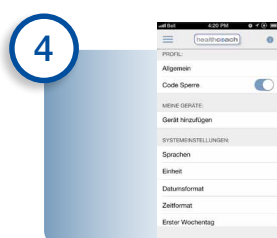

- ▢ App starten und den Anweisungen folgen
- ▣ Start the app and follow the instructions

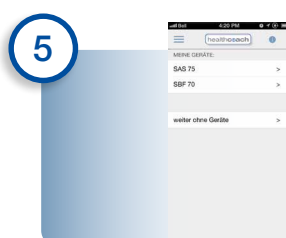

- ▢ SBF 70 in App auswählen
- ▣ Select SBF 70 in the app



- ▢ Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen
- ▣ Assign the user when requested to do so by the app